



## Informazioni urgenti sulla sicurezza

Correzione delle istruzioni per l'uso  
riguardo a

### **Manico portabatterie Economy per laringoscopi**

01.04.2022

Gentile cliente,

secondo i nostri dati, hanno ricevuto il seguente prodotto:

Prodotti	REF	Modello	Lotti interessati
Laringoscopi	03.41001.721	F.O. Manico portabatterie Economy, verde	U =2013; V =2014; W =2015; X =2016; Y =2017; Z =2018;
	03.11001.721	C Manico portabatterie Economy, blu	A =2019; B =2020

#### **Descrizione del problema:**

La durata di vita dei manici di cui sopra è limitata a 5 anni. Se usato oltre questa durata, il manico di plastica può rompersi a causa dell'invecchiamento del materiale.

Questa informazione mancava nelle istruzioni per l'uso dei manici.


Le informazioni mancanti sono state aggiunte con la versione del manuale di istruzioni QM-GAP-0140D.

#### **Misure richieste:**

Si prega di controllare il LOT dei manici Economy.

Se hanno superato i 5 anni di vita, smaltirli.

Troverete il LOT sull'etichetta dell'imballaggio e/o sulla testa del manico (vedi foto):

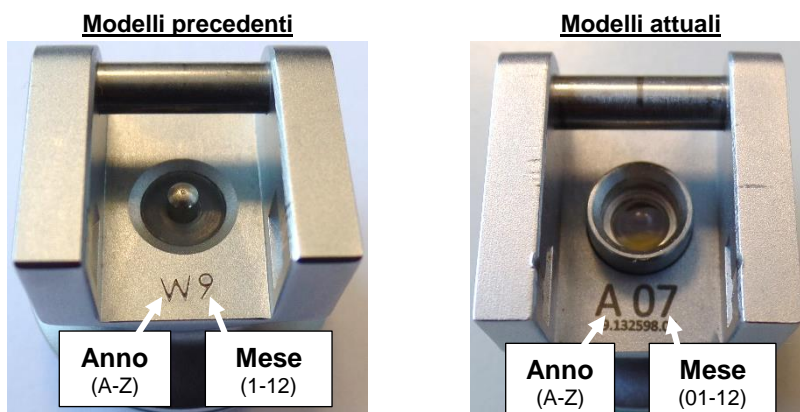

Sotto il seguente link, troverete le istruzioni per l'uso attualmente valide per il download sulla nostra homepage:  
<https://www.kawemed.com/en/downloads/manuals/>

**KIRCHNER & WILHELM**

GmbH + Co. KG  
Eberhardstr. 56  
71679 Asperg, Germany  
www.kawemed.com  
info@kawemed.de

**Zentrale / Switchboard**

Fon +49 (0)7141 / 68 188 - 0  
Fax +49 (0)7141 / 68 188 - 11  
**Verkauf / Sales Department**  
Fon +49 (0)7141 / 68 188 - 44  
Fax +49 (0)7141 / 68 188 - 55

kompetenz in medizintechnik

weltweit

seit 1890

MEDIZINTECHNIK  
seit 1890**KaWe****Divulgazione delle informazioni qui descritte:**

Si prega di assicurarsi che tutti gli utenti dei prodotti di cui sopra e altre persone da informare siano a conoscenza di queste informazioni urgenti sulla sicurezza. Se avete dato i prodotti a terzi, vi preghiamo di inoltrare una copia di queste informazioni o di informare la persona di contatto indicata di seguito.

Si prega di conservare queste informazioni almeno fino al completamento della misura.

L'autorità nazionale competente ha ricevuto una copia di questa "Informazione urgente sulla sicurezza".

**KIRCHNER & WILHELM** si rammarica di qualsiasi inconveniente causato da questo problema.

Con cordiali saluti

**KIRCHNER & WILHELM** GmbH + Co. KG  
Eberhardstr. 56  
D-71679 Asperg  
Germany

Sandrina Lerch  
[qm@kawemed.de](mailto:qm@kawemed.de)  
Gestione della qualità