

**Avviso di sicurezza sul campo**  
**Correzione urgente relativa a ~~di~~ dispositivo medico – Potenziale**  
**allentamento del Carrello strumenti sui Sistemi da Vinci X e Xi**  
**(Espansione ISIFA2022-14-C)**

**1- Premessa e  
motivazione  
dell'azione  
sul campo**

Gentile cliente Intuitive,


Nota: a inizio 2023, Intuitive ha inviato una comunicazione ai clienti interessati in merito alla presente Azione sul campo. Da allora abbiamo stabilito che vi sono ulteriori USM interessati da questo problema. Questa comunicazione viene attualmente inviata ai clienti che possiedono tali USM aggiuntivi. Il presente Avviso di sicurezza sul campo richiede che il modulo di ricevuta allegato venga compilato e reso secondo le istruzioni al termine del presente documento.

Le inviamo questo avviso di sicurezza sul campo per informarLa che, in un lotto di bracci strumento (USM) dei sistemi da Vinci X e Xi, i cCarrelli strumenti possono staccarsi dalla guida lineare dell'asse di inserimento durante la spedizione, la movimentazione o il riposizionamento dei bracci, quando il sistema è spento. Il carrello strumenti dovrebbe rimanere ~~rimarrebbe~~ fissato al motore di azionamento per evitare ~~il movimento di~~ la caduta libera o il completo distacco dall'USM. Tuttavia, si potrebbe avere la sensazione che il carrello strumenti non sia collegato saldamente alla guida. Questa condizione può anche causare un aumento dell'attrito lungo l'asse di inserimento.

Pertanto, Intuitive programmerà una visita presso i siti interessati per effettuare un'ispezione dell'USM interessato e organizzare la sostituzione dell'USM, se necessario.

**I carrelli strumenti integri funzionano come previsto e devono rimanere saldamente fissati per tutta la durata della procedura chirurgica.**

	<p>Figura 1: Carrello strumenti e guida dell'asse di inserimento sul braccio strumento</p> <p>Il carrello strumenti scorre sulla guida lineare dell'asse di inserimento che assicura un movimento fluido lungo l'asse di inserimento e mantiene un allineamento preciso dello strumento con la cannula. Tuttavia, in un lotto di USM la larghezza della guida di inserimento è inferiore alla specifica. Questo fa sì che il carrello strumenti rischi di staccarsi dalla guida lineare quando si imprime una notevole forza esterna sul lato del carrello strumenti.</p> <p>A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ecco alcuni esempi di quando tali forze possono essere generate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spedizione e movimentazione dell'USM o del Sistema</li> <li>• Se il carrello strumenti viene afferrato per muovere manualmente il braccio quando il sistema da Vinci X/Xi è spento</li> <li>• Altre forze d'impatto elevate, come collisioni durante lo spostamento o lo stivaggio del carrello del braccio</li> </ul> <p>Il funzionamento e le prestazioni del carrello strumenti lungo l'asse di inserimento delle guide interessate non vengono alterati se il carrello strumenti è fissato correttamente alla guida. Le forze derivanti da cambi strumento standard e/o da collisioni degli strumenti interne/esterne non sono tali da staccare il Carrello strumenti dalla guida lineare. <b>È altamente improbabile che il carrello strumenti si stacchi dalla guida lineare durante il normale utilizzo dell'USM interessato, durante una procedura chirurgica.</b></p>
<p>2- Rischi per la salute</p>	<p>A oggi, non abbiamo ricevuto segnalazioni di Incidenti gravi** relativamente a questo problema.</p> <p>L'utilizzo di un carrello strumenti staccato durante una procedura può comportare rischi per la salute. Collisioni di strumenti, interne ed esterne, su un Carrello strumenti già staccato dalla guida lineare possono provocare uno spostamento laterale della punta dello strumento. Questo spostamento laterale può provocare un contatto involontario con i tessuti.</p>

	<p>Inoltre, possono verificarsi interazione involontaria con i tessuti e/o lesioni a causa dell'aumento dell'attrito durante l'utilizzo di uno strumento installato su un carrello strumenti staccato. Il grado di danno dipende dal tipo di tessuto e dal grado di interazione, che può variare da trascurabile a grave.</p> <p>Uno strumento installato su un carrello staccato potrebbe tuttavia non presentare difetti funzionali dovuti all'aumento dell'attrito durante l'uso clinico. In questo caso, non si verificano danni al paziente. Il distacco del carrello strumenti si può notare quando il carrello non è ben collegato durante l'uso o in contesti che non interessano l'uso clinico.</p> <p>Durante una procedura, le collisioni degli strumenti, interne ed esterne, non rischiano di staccare il Carrello strumenti dalla guida lineare di inserimento.</p>								
<p>3- Prodotti interessati</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Descrizione (se applicabile)</th> <th>Identificativo univoco del dispositivo</th> <th>Numeri di serie interessati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380647</td> <td>ASSY, USM, IS4000 Sistema chirurgico da Vinci Xi Sistema chirurgico da Vinci X</td> <td>00886874114216</td> <td>Vedere Appendice B</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Descrizione (se applicabile)	Identificativo univoco del dispositivo	Numeri di serie interessati	380647	ASSY, USM, IS4000 Sistema chirurgico da Vinci Xi Sistema chirurgico da Vinci X	00886874114216	Vedere Appendice B
Codice	Descrizione (se applicabile)	Identificativo univoco del dispositivo	Numeri di serie interessati						
380647	ASSY, USM, IS4000 Sistema chirurgico da Vinci Xi Sistema chirurgico da Vinci X	00886874114216	Vedere Appendice B						
<p>4- Provvedimenti a carico del Cliente/Utente</p>	<p><b>Tutti i sistemi interessati possono essere utilizzati in modo sicuro se si seguono le seguenti istruzioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prima di ciascun utilizzo</b>, ispezionare tutti i carrelli strumenti dei sistemi da Vinci X e Xi interessati seguendo le "<b>Istruzioni per l'ispezione dei carrelli strumenti</b> riportate nell'<b>Appendice A</b>. Se un carrello strumenti non supera l'ispezione o se vi sono dubbi, non utilizzare l'USM e informare Intuitive. Se 3 dei 4 carrelli strumenti dell'USM superano l'ispezione, il sistema da Vinci X o Xi può essere utilizzato secondo le istruzioni riportate nella sezione Procedura a tre bracci del Manuale dell'utente dei sistemi da Vinci X e Xi.</li> <li>• <b>Continuare a seguire le istruzioni</b> del Manuale dell'utente da Vinci X e Xi e <b>tenere l'USM/braccio afferrando l'impugnatura grigia</b> durante lo spostamento e il posizionamento manuale del braccio. <b>Non utilizzare il carrello strumenti per riposizionare manualmente l'USM</b> quando il sistema è spento o in condizione di errore. <b>Se ciò è inevitabile in caso di emergenza, interrompere l'utilizzo dell'USM e informare Intuitive.</b> Un rappresentante Intuitive programmerà una visita per eseguire l'ispezione e la correzione necessaria.</li> </ul>  <p><b>Figura 2:</b> immagine che mostra come tenere correttamente l'USM durante il posizionamento manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso in cui sia impossibile manipolare gli strumenti in maniera precisa e controllata, contattare immediatamente il Servizio di assistenza tecnica Intuitive per evitare lesioni dei tessuti.</li> </ul> <p>Nell'ambito della presente comunicazione, adottare le seguenti azioni standard:</p>								

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo avviso deve essere trasmesso a tutti coloro che necessitano di essere informati all'interno dell'organizzazione o alle funzioni a cui sono stati trasferiti i dispositivi potenzialmente interessati.</li> <li>• <b>Compilare immediatamente il Modulo di ricevuta allegato e</b> inviarlo a Intuitive via fax o e-mail, come indicato sul modulo stesso.</li> <li>• Conservare in archivio <b>una copia della presente lettera, conservarne una con il sistema interessato e riporre il modulo di ricevuta nella relativa documentazione.</b></li> <li>• Informare Intuitive in caso di eventi avversi*/incidenti gravi** o problemi di qualità relativamente all'uso dei dispositivi interessati tramite il processo standard di reclamo.</li> <li>• Inoltre, in caso di Incidenti gravi** o problemi di qualità, seguire il processo standard di segnalazione all'autorità sanitaria locale, se del caso.</li> </ul>
<p>5- Azioni da intraprendere da parte di Intuitive Surgical</p>	<p>Un rappresentante Intuitive programmerà una visita in loco per ispezionare la guida lineare di inserimento e sostituire l'USM se necessario.</p> <p><b>Per i rispettivi USM e i numeri di serie del Sistema da Vinci X o Xi connessi, consultare l'Appendice B con elenco dei prodotti interessati .</b></p>
<p>6- Ulteriori informazioni e assistenza</p>	<p>Per ulteriori informazioni o assistenza in merito alla presente Correzione relativa al dispositivo medico, contatti il Suo Rappresentante clinico commerciale o il Servizio assistenza clienti di Intuitive ai numeri di telefono indicati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Europa, Medio Oriente, Asia e Africa: +800.0821.2020 o +41.21.821.2020 (8.00-18.00 CET) o all'indirizzo <a href="mailto:EUCS@intusurg.com">EUCS@intusurg.com</a></li> </ul>

La informiamo che la presente Azione correttiva di sicurezza sul campo è stata notificata alle Autorità normative locali della Sua area geografica.

Cordiali saluti,  
**Intuitive Surgical SAS**  
 11 avenue de Canteranne  
 Pessac FRANCE

Definizioni:

\*\*Si definisce incidente grave (EUMDR 2017/745) "qualsiasi incidente che abbia provocato, possa aver provocato o possa provocare, direttamente o indirettamente, una delle seguenti conseguenze:

- a. decesso di un paziente, utente o altro individuo
- b. peggioramento temporaneo o permanente dello stato di salute di un paziente, utente o altro individuo,
- c. una grave minaccia per la salute pubblica"

## MODULO DI RICEVUTA

### Avviso di sicurezza sul campo

## Correzione urgente relativa a dispositivo medico – Potenziale allentamento del Carrello strumenti sui Sistemi da Vinci X e Xi (Espansione ISIFA2022-14-C)

Inviare a:

Nome ospedale: <mail merge>

Indirizzo: <mail merge>

Città, stato, CAP: <mail merge>

SFID: <mail merge>

ALL'ATTENZIONE DI: <mail merge>

**LA PREGHIAMO DI COMPILARE IL MODULO CON TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE E DI RESTITUIRLO IMMEDIATAMENTE**

1. Ho ricevuto e letto il presente avviso.
2. Ho provveduto a informare tutto il personale interessato del contenuto del presente avviso.
3. Contatterò Intuitive per qualsiasi dubbio o domanda.

Nome dell'ospedale: \_\_\_\_\_

Posizione:

Nome e cognome (in stampatello): \_\_\_\_\_

- Coordinatore per la robotica  
 Responsabile sala operatoria  
 Responsabile gestione rischi  
 Chirurgo  
 Altro: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Numero di telefono: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_


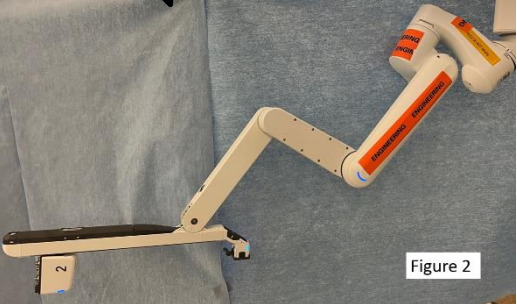

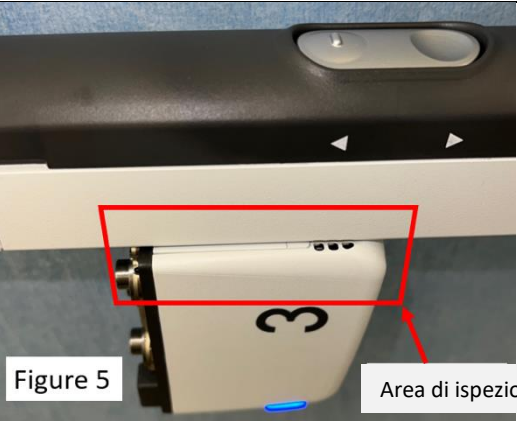
Data: \_\_\_\_\_

**LA PREGHIAMO DI INVIARE QUESTO MODULO DI RICEVUTA VIA FAX O VIA E-MAIL A Intuitive**  
**ATTN: REGULATORY COMPLIANCE FIELD ACTIONS**  
**Oggetto dell'e-mail: Potential Loose Instrument Carriage on da Vinci X and Xi Systems (ISIFA2022-14-C)**  
**E-mail: <Input regional email inbox>**

**Servizio assistenza clienti:**


- Europa: +800 0821 2020 oppure +41 21 821 2020 (8:00-18:00) oppure via e-mail all'indirizzo EUCS@intusurg.com

**ISIFA2022-14-C Appendice A: Istruzioni per l'ispezione del Carrello strumenti**

<p>Dalla posizione stivata, orientare tutti i bracci del carrello paziente in modo che i bracci strumento siano in posizione verticale (Figura 1). Quando ci si trova di fronte alla colonna del carrello paziente individuare il lato destro del carrello strumenti come indicato dalla freccia nella Figura 1.</p>	
<p>Posizionare un braccio del carrello paziente in modo che sia completamente inclinato in avanti e il braccio strumento sia parallelo al terreno (Figura 2).</p>	 <p>Figure 2</p>
<p>Con solo due dita, esercitare una moderata pressione al centro del carrello strumenti sul lato destro, come illustrato nella Figura 3. <b>Questa operazione deve essere eseguita sul lato destro del carrello strumenti, come illustrato nella Figura 1.</b> Il braccio potrebbe spostarsi. In caso di spostamento, stabilizzare il braccio per evitare collisioni con l'utente o con altri bracci.</p>	 <p>Figure 3</p>
<p>Ispezionare attentamente da tutte le angolazioni l'interfaccia tra il carrello strumenti e il braccio (area di ispezione nel riquadro rosso, Figura 4) e valutare l'interfaccia in base ai criteri superamento/ mancato superamento riportati di seguito. <b>Questa operazione deve essere eseguita sul lato destro del carrello strumenti, come illustrato nella Figura 1.</b> Ripetere tutti i passaggi per tutti i bracci rimanenti.</p>	 <p>Area di ispezione</p>
<p><u>SUPERAMENTO</u> : impossibile vedere il numero di serie e il codice a barre (Figura 5).</p> <p>Accettabile per l'uso del sistema.</p>	 <p>Figure 5</p> <p>Area di ispezione</p>

**MANCATO SUPERAMENTO** : è possibile vedere il numero di serie e una sezione del codice a barre (Figura 6).

Non usare il braccio.

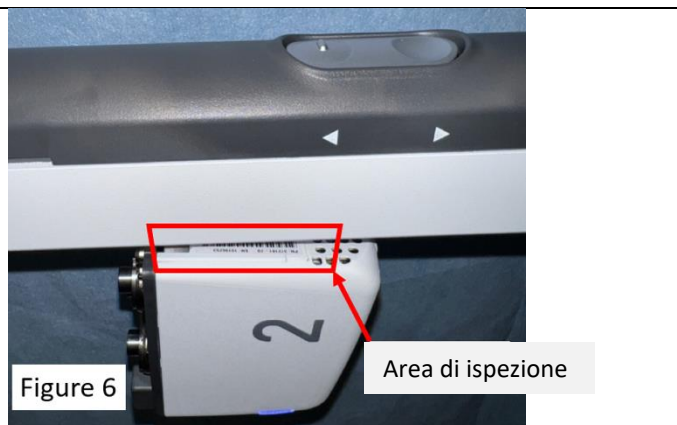

## ISIFA2022-14-C Appendice B: Numero di serie del sistema e dell'USM interessati

Paese	Numero di serie del sistema	Numero di serie USM
Austria	SK4538	413621
Austria	SK5949	10170395
Austria	SK5949	10170403
Austria	SK5949	10170409
Austria	SK5949	10172630
Austria	SL0332	376685
Austria	SL1024	10125244
Austria	SL1024	10134833
Austria	SL1024	10138887
Belgio	SK5669	918535
Belgio	SK5694	10134720
Belgio	SK5694	10134826
Belgio	SK5694	10134832
Belgio	SK5694	10136499
Belgio	SK5727	10130303
Belgio	SK5727	10133467
Belgio	SK5727	10133472
Belgio	SK5728	10128376
Belgio	SK5728	10129336

Paese	Numero di serie del sistema	Numero di serie USM
Finlandia	SK0695	384060
Finlandia	SL1029	10120359
Francia	SK2819	617787
Francia	SK3166	391466
Francia	SK5543	10111757
Francia	SK5543	10112413
Francia	SK5543	10112416
Francia	SK5617	380045
Francia	SK5617	10128375
Francia	SK5617	10132801
Francia	SK5861	557439
Francia	SK5893	10150506
Francia	SK5893	10152292
Francia	SL0059	366774
Francia	SL0076	10082892
Francia	SL0080	361229
Francia	SL0292	479143
Francia	SL0314	10125250
Francia	SL0317	387331

Belgio	SK5728	10134819
Belgio	SK5729	10126147
Belgio	SK5729	10132111
Belgio	SK5729	10132805
Belgio	SK6050	10173902
Belgio	SK6050	10174495
Belgio	SK6050	10174507
Belgio	SK6050	10174513
Bulgaria	SK4075	463344
Cipro	SK0192	467533
Repubblica Ceca	SK0329	456368
Repubblica Ceca	SK0878	576745
Repubblica Ceca	SK5941	10168062
Repubblica Ceca	SK5941	10170397
Repubblica Ceca	SK5941	10173165
Repubblica Ceca	SK5941	10173185
Danimarca	SK4115	365573
Danimarca	SK4116	349565
Danimarca	SK5693	563688
Danimarca	SK5693	10117709
Danimarca	SK5693	10134727

Francia	SL0835	597903
Francia	SL0977	10117104
Francia	SL0980	10117130
Francia	SL0980	10126158
Francia	SL1010	790517
Francia	SL1012	10163214
Francia	SL1014	10150500
Francia	SL1016	10117139
Francia	SL1019	10127734
Francia	SL1022	10150523
Francia	SL1022	10153504
Francia	SL1022	10166590
Francia	SL1079	10164252
Francia	SL1079	10173172
Francia	SL1079	10176315
Francia	SL1079	10176328
Germania	SK0427	439283
Germania	SK0427	454372
Germania	SK0935	964923
Germania	SK1325	782036
Germania	SK2060	373009

Paese	Numero di serie del sistema	Numero di serie USM
Germania	SK3234	10132100
Germania	SK3818	10119124
Germania	SK4094	377494
Germania	SK4094	532323
Germania	SK4910	10117107
Germania	SK5356	10120361
Germania	SK5544	10107521
Germania	SK5544	10108775
Germania	SK5544	10108781
Germania	SK5544	10113536
Germania	SK5565	10114854
Germania	SK5565	10116368
Germania	SK5565	10116374
Germania	SK5565	10120353
Germania	SK5630	10129335
Germania	SK5630	10130872
Germania	SK5630	10130877
Germania	SK5630	10130892
Germania	SK5806	10164258
Germania	SK5914	10168061
Germania	SK5914	10168063
Germania	SK5914	10169133
Germania	SK5914	10169778
Germania	SK5930	10175357
Germania	SK6057	10169114
Germania	SK6057	10169123
Germania	SK6057	10169132
Germania	SL0066	398405
Germania	SL0094	402947
Germania	SL0100	415129

Paese	Numero di serie del sistema	Numero di serie USM
Germania	SL0995	641170
Germania	SL1007	10132107
Germania	SL1007	10134726
Germania	SL1007	10136007
Germania	SL1013	10127113
Germania	SL1013	10134831
Germania	SL1017	10120346
Germania	SL1017	10120998
Germania	SL1028	10116381
Germania	SL1028	10121691
Germania	SL1033	10166981
Germania	SL1037	10173178
Germania	SL1043	10166581
Germania	SL1043	10171445
Germania	SL1071	10117141
Germania	SL1096	10118361
Germania	SL1096	10169791
Germania	SL1096	10173166
Germania	SL1096	10173170
Germania	SL1098	10223247
Germania	SL1101	10122986
Germania	SL1102	10185751
Grecia	SK1310	449263
Grecia	SK5950	10173893
Grecia	SK5950	10174497
Grecia	SK5950	10176331
Ungheria	SK5547	10108773
Ungheria	SK5721	10130300
Ungheria	SK5721	10130307
Ungheria	SK5721	10130869



Germania	SL0303	10120981
Germania	SL0315	402412
Germania	SL0516	824460
Germania	SL0912	10120356
Germania	SL0989	10124670
Germania	SL0989	10125251
Germania	SL0989	10131133
Germania	SL0994	10120357
Germania	SL0994	10120994
Germania	SL0994	10124668
Germania	SL0994	10124671

Ungheria	SK5721	10130873
Irlanda	SK1355	838045
Irlanda	SK5581	10115668
Irlanda	SK5581	10115671
Irlanda	SK5581	10115684
Irlanda	SK5581	10115686
Italia	SK0592	10143149
Italia	SK0596	462921
Italia	SK0596	944538

Paese	Numero di serie del sistema	Numero di serie USM
Italia	SK0799	10116385
Italia	SK0799	10116386
Italia	SK0799	10130310
Italia	SK1059	560355
Italia	SK1061	396434
Italia	SK1232	726192
Italia	SK4836	795164
Italia	SK5390	10112408
Italia	SK5649	10133468
Italia	SK5654	10137165
Italia	SK5654	10139726
Italia	SK5662	10115681
Italia	SK5662	10120363
Italia	SK5664	10135993
Italia	SK5664	10151629
Italia	SK5666	10135557
Italia	SK5666	10135998
Italia	SK5666	10153508
Italia	SK5668	10132809
Italia	SK5677	10125236
Italia	SK5900	10182413
Italia	SK5901	10166584
Italia	SK5901	10170401
Italia	SK5901	10182410
Italia	SK5903	10168053
Italia	SK5903	10180257
Italia	SK5903	10181065
Italia	SK5917	10166987
Italia	SK5917	10169127
Italia	SK5917	10169783
Italia	SK5917	10175360
Italia	SK2015	10224969
Italia	SK2015	10224973
Italia	SK2015	10224976
Italia	SK6441	10223849
Italia	SK6441	10223850
Italia	SL0993	10117109
Italia	SL0993	10118359

Paese	Numero di serie del sistema	Numero di serie USM
Italia	SL1031	10137176
Paesi Bassi	SK0507	370990
Paesi Bassi	SK0840	697983
Paesi Bassi	SK0957	430224
Paesi Bassi	SK1844	463338
Paesi Bassi	SK5716	10124663
Paesi Bassi	SK5716	10129329
Paesi Bassi	SK5716	10134713
Paesi Bassi	SK5716	10136490
Paesi Bassi	SK6026	10161585
Paesi Bassi	SK5716	10170402
Paesi Bassi	SK5716	10170406
Paesi Bassi	SK5716	10170408
Paesi Bassi	SK6029	10164254
Paesi Bassi	SK6029	10169792
Paesi Bassi	SK6029	10174498
Paesi Bassi	SL0032	10126144
Paesi Bassi	SL0854	442543
Paesi Bassi	SL0966	855468
Norvegia	SK0845	474861
Norvegia	SK1919	10137175
Norvegia	SK5897	10174510
Norvegia	SL1105	10156979
Polonia	SK4436	396980
Polonia	SK5689	10128370
Polonia	SK5689	10129982
Polonia	SK5690	10117692
Polonia	SK5690	10133465
Polonia	SK5690	10134074
Polonia	SK5690	10166577
Polonia	SK5915	10172610
Polonia	SK5915	10172620
Polonia	SK5915	10173164
Polonia	SK5915	10174504
Polonia	SL1006	10136498
Polonia	SL1023	10175763
Polonia	SL1023	10176327
Portogallo	SK0866	386676
Romania	SK5609	10136486

Paese	Numero di serie del sistema	Numero di serie USM
Romania	SK5951	412472
Romania	SK5951	10171446
Romania	SK5951	10171454
Slovacchia	SL0622	764722
Spagna	SK0158	566569
Spagna	SK1799	901066
Spagna	SK2020	557323
Spagna	SK2524	607406
Spagna	SK3780	594185
Spagna	SK5387	10111765
Spagna	SK5667	10136559
Spagna	SK5674	10130317
Spagna	SK5675	10130305
Spagna	SK5675	10133459
Spagna	SK5869	10164260
Spagna	SK5892	10166986
Spagna	SK5892	10173167
Spagna	SK6437	10223853
Spagna	SK6438	10223255
Spagna	SK6440	10223250
Spagna	SL0039	532238
Spagna	SL0996	10117117
Spagna	SL1020	10117699
Svezia	SK0540	359194
Svezia	SK5736	10130891
Svezia	SL0909	10119125
Svezia	SL1072	10134724
Svezia	SL1072	10163199
Svezia	SL1072	10163201
Svizzera	SK0315	590734
Svizzera	SK0328	659787
Svizzera	SK4822	401677
Svizzera	SK5574	10110547
Svizzera	SK5574	10114253
Svizzera	SK5574	10114868
Svizzera	SK5574	10114871
Svizzera	SK5599	10117701
Svizzera	SK5599	10127125
Svizzera	SK5599	10131142
Svizzera	SK5929	10164245
Svizzera	SK5929	10185261

Paese	Numero di serie del sistema	Numero di serie USM
Svizzera	SL1103	10124650
Svizzera	SL1103	10155071
Svizzera	SL1103	10158720
Svizzera	SL1103	10186679
Turchia	SK3683	10175764
Turchia	SK4310	10126140
Turchia	SK5601	10121002
Turchia	SK5601	10125232
Turchia	SK5601	10132112
Turchia	SK5645	10129983
Turchia	SK5645	10130889
Turchia	SK5942	10163205
Turchia	SK6189	10223855
Turchia	SL0997	10117702
Turchia	SL0997	10117715
Turchia	SL0997	10119119
Regno Unito	SK0379	611856
Regno Unito	SK1106	693975
Regno Unito	SK3258	456703
Regno Unito	SK3568	394397
Regno Unito	SK4022	473867
Regno Unito	SK4217	575591
Regno Unito	SK4366	451813
Regno Unito	SK5673	10129977
Regno Unito	SK5946	10166595
Regno Unito	SK5946	10168071
Regno Unito	SK5946	10173889
Regno Unito	SK6015	10170394
Regno Unito	SK6015	10174505
Regno Unito	SK6015	10174506
Regno Unito	SK6018	10176320
Regno Unito	SK6018	10176324
Regno Unito	SK6018	10177843
Regno Unito	SK6302	10223863
Regno Unito	SK6479	10223261
Regno Unito	SK6479	10224960
Regno Unito	SK6479	10224966
Regno Unito	SK6479	10224980
Regno Unito	SK6480	10223254
Regno Unito	SK6480	10223267
Regno Unito	SL0974	674021
Regno Unito	SL1040	10146532