

Teleflex Medical
IDA Business & Technology Park,
Dublin Road, Athlone
Westmeath, Irlanda

Aprile 2024

URGENTE – AVVISO DI SICUREZZA SUL CAMPO

Tipo di azione	Nota informativa			
Nome prodotto	Kit per catetere a palloncino intra-aortico Arrow® FiberOptix™ Kit per catetere a palloncino intra-aortico Arrow® UltraFlex™			
Riferimento Teleflex	EIF-000561			
Codice prodotto	IAB-05830-LWS	IAB-05830-U	IAB-05840-LWS	IAB-05840-U
	IAB-05850-LWS	IAB-06830-U	IAB-06840-U	IAB-06850-U
Numero di batch/lotto:	Fare riferimento all'Appendice 2			
Identificativo univoco del dispositivo (UDI)				

Gentile cliente,

Dettagli dei dispositivi interessati

Arrow International LLC, una sussidiaria di Teleflex Incorporated (collettivamente "Teleflex"), ha avviato un'Azione correttiva di sicurezza sul campo ("FSCA") volontaria per i prodotti sopra elencati; consultare l'Appendice 2 per informazioni sul Codice prodotto, sul numero di lotto e sull'Identificativo univoco del dispositivo (UDI).

Descrizione del problema e azioni immediate necessarie

Teleflex sta avviando questa FSCA volontaria per i prodotti sopra menzionati a causa di segnalazioni che indicano una condizione poco frequente che, **se non identificata e corretta tempestivamente, potrebbe comportare gravi conseguenze per la salute**. Il problema potrebbe manifestarsi come:

- incapacità del palloncino intra-aortico di gonfiarsi completamente per tutta la sua lunghezza;
- lume centrale danneggiato o rotto nel segmento contenuto all'interno del palloncino;
- perdita di elio o presenza di sangue nel percorso dell'elio.

Le possibili conseguenze del problema di cui sopra comprendono una riduzione o la perdita del supporto emodinamico normalmente fornito dalla terapia IABP (Intra-Aortic Balloon Pump). Ciò richiederebbe la sostituzione immediata del dispositivo con conseguente ritardo o interruzione temporanea della terapia IABP. **Pertanto, questa condizione potrebbe comportare un aumento del rischio di complicanze emodinamiche o ischemiche, incluso il decesso.** Tra il 5 aprile 2022 e il 5 aprile 2024 sono pervenute complessivamente 337 segnalazioni relative alle condizioni sopra menzionate. Ciò include le segnalazioni di 31 lesioni e 3 decessi. In base a quanto segnalato, due dei tre decessi non erano correlati al problema e il decesso dei pazienti si è verificato a distanza di diversi giorni. Nel terzo caso, il decesso del paziente potrebbe essere o non essere correlato; il dispositivo è stato utilizzato in shock cardiogeno profondo con ripetuti allarmi "rossi".

Azioni per rilevare il problema:

1. Prima dell'uso, **assicurarsi che sia disponibile un catetere IAB di backup**, nel caso in cui sia necessario un dispositivo sostitutivo.
2. Prima dell'inserimento, **gli utenti devono ispezionare tutti i cateteri IAB coinvolti in questa azione correttiva** per rilevare eventuali segni di un avvolgimento eccessivamente attorcigliato del palloncino o di un piegamento dell'asta del palloncino. L'eccessivo attorcigliamento si manifesta come un passo progressivo o una tensione all'interno dell'avvolgimento elicoidale all'estremità distale o prossimale del palloncino. Nelle immagini 1a e 1b sottostanti sono mostrati esempi di avvolgimento corretto rispetto a quello con eccessivo attorcigliamento. Non inserire cateteri con sospettata presenza di un avvolgimento eccessivamente attorcigliato. **Tuttavia, non tutti i cateteri interessati appaiono con un avvolgimento del palloncino che sia visibilmente troppo attorcigliato.**

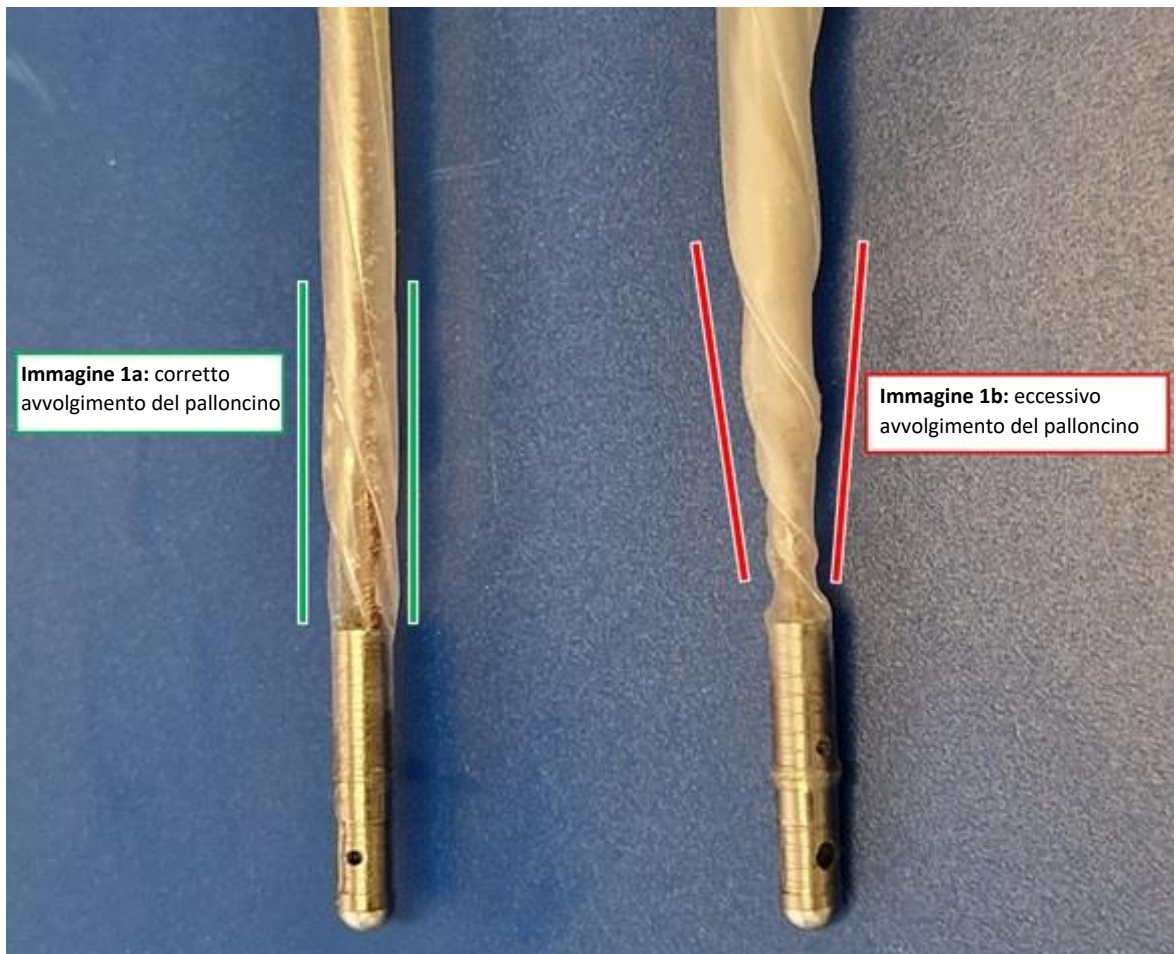


Immagine 1

3. Tutti i cateteri IAB coinvolti in questa azione correttiva devono essere inseriti sotto guida fluoroscopica. Una volta inseriti e collegati, **utilizzare la fluoroscopia per valutare il gonfiaggio completo del palloncino**. La valutazione fluoroscopica deve coprire l'intera lunghezza del palloncino (eseguire una panoramica secondo necessità) e deve includere diversi cicli di gonfiaggio/sgonfiaggio. La fluoroscopia intermittente deve rimanere disponibile per un massimo di 3 minuti dopo l'inizio della contropulsazione ciclica uno a uno o fino alla conferma del gonfiaggio completo del palloncino.
4. Come di norma, gli utenti devono prestare attenzione e rispondere agli allarmi della pompa in conformità alle Istruzioni per l'uso e alla Guida per l'utente.
 - Nel caso in cui venga utilizzata una pompa Arrow AC3 o Autocat-2, un **allarme alta pressione** o **allarme basale alto** potrebbe attivarsi e visualizzarsi sulla console della pompa. Questi allarmi "rossi" richiedono attenzione immediata in base alle Istruzioni per l'uso e alla Guida per l'utente. Gli allarmi forniscono agli utenti un algoritmo di risoluzione dei problemi che include il gonfiaggio IAB incompleto.
 - Nel caso in cui venga utilizzata una pompa Getinge CardioSave, potrebbe attivarsi un allarme di **restrizione del catetere IAB**.
 - Qualsiasi **allarme** della pompa **che indichi una perdita di elio (perdita di elio oppure perdita di gas)** potrebbe indicare che il catetere IAB non funziona come previsto.
 - Come sempre, è disponibile il supporto telefonico in tempo reale per i cateteri IAB e IABP Arrow utilizzando i recapiti dell'Assistenza per la cura del paziente riportati di seguito.
5. Come sempre, gli utenti devono prestare attenzione nel rispondere agli indicatori del posto letto, laddove un catetere IAB non stia funzionando come previsto. Questo include:
 - Presenza di sangue nel percorso dell'elio
 - Aumento della pressione diastolica inferiore del previsto

Azioni immediate da intraprendere dopo l'identificazione del problema:

Se si sospetta questo problema su un catetere IAB, sulla base di una delle caratteristiche sopra riportate, il catetere deve essere rimosso e sostituito seguendo la procedura descritta nelle Istruzioni per l'uso. Un catetere a palloncino sostitutivo può essere inserito in modo controlaterale o ipsilaterale, secondo quanto stabilito dal medico responsabile dopo aver considerato le opzioni individuali di accesso femorale del paziente e le caratteristiche cliniche pertinenti.

Ogni incidenza sospetta di tale condizione deve essere segnalata immediatamente a Teleflex utilizzando non appena possibile le informazioni di contatto riportate di seguito. Se necessario, anche il rappresentante di vendita locale può fornire assistenza nel completamento di una segnalazione.

I nostri registri indicano che Lei ha ricevuto prodotti che sono soggetti a questa FSCA.

Il prodotto non verrà rimosso; è possibile continuare a utilizzare i prodotti nell'ambito di questa nota informativa in base alle istruzioni, alle avvertenze e alle precauzioni aggiuntive contenute nel presente documento.

A seconda della collocazione del dispositivo La preghiamo di attenersi al seguente elenco di azioni:

Collocazione del dispositivo	Numero dell'elenco di azioni
Strutture sanitarie (ospedali, personale medico, ecc.)	1
Distributori	2

Elenco di azioni numero 1 – Strutture sanitarie

1. Distribuisca immediatamente la presente nota informativa a tutte le persone che devono esserne a conoscenza all'interno della Sua organizzazione (ad es., unità di terapia coronarica, reparto di cardiologia interventistica, laboratorio di cateteri cardiaci, ecc.) o a qualsiasi organizzazione in cui sia stato trasferito il prodotto potenzialmente interessato.
2. Le chiediamo di controllare immediatamente il Suo inventario per verificare la presenza di prodotti nell'ambito di questo Avviso urgente sui dispositivi medici.
3. Se dispone del prodotto interessato, contrassegni la casella di controllo pertinente sul Modulo di conferma (Appendice 1) e spedisca il modulo compilato comprensivo dei prodotti interessati ai recapiti indicati della Teleflex. Se desidera restituire i prodotti interessati, può anche avviare questa operazione contattando l'Assistenza clienti Teleflex tramite i recapiti forniti di seguito.
4. Se non dispone del prodotto interessato, contrassegni la casella di controllo pertinente sul Modulo di conferma (Appendice 1) e spedisca il modulo a Teleflex tramite i recapiti forniti.

Elenco di azioni numero 2 – Distributori

1. Aggiorni i recapiti alle pagine quattro e cinque dell'Assistenza clienti Teleflex con i Suoi recapiti.
2. Inoltri immediatamente il presente avviso di sicurezza sul campo a tutti i clienti che hanno ricevuto il prodotto interessato. Chieda al Suo cliente di compilare il Modulo di conferma (Appendice 1) e di rispedirlo a Lei.
3. Le chiediamo di controllare immediatamente il Suo inventario per identificare gli eventuali prodotti interessati nell'ambito della presente FSCA; consulti l'Appendice 2 per l'elenco dei codici e dei lotti interessati. Inserisca una copia di questa notifica con tutti i prodotti interessati e si assicuri che la notifica sia inclusa nelle distribuzioni future dei prodotti interessati.

4. In qualità di distributore, dovrà quindi confermare a Teleflex di aver completato l'attività sul campo delineata nelle azioni 1 e 2 di questo Elenco di azioni numero 2. Al termine delle azioni, inoltri il Modulo di conferma compilato ai recapiti indicati della Teleflex.
5. Teleflex informerà tutte le autorità competenti degli Stati membri dello Spazio economico europeo/Svizzera/Regno Unito (SEE/CH/UK) e della Turchia nei quali Teleflex distribuisce direttamente.
6. Se il prodotto è stato ulteriormente distribuito al di fuori del Suo Paese, La preghiamo di informare l'Assistenza clienti Teleflex inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail sottostante.
7. Se Lei è un distributore e/o ha la responsabilità di segnalazione all'interno o all'esterno dell'area SEE/CH/TR/UK, informi l'autorità competente locale di questa azione. La preghiamo di inoltrare la notifica e tutte le comunicazioni con l'autorità competente locale a Teleflex.

Segnalazione di eventi avversi

Eventuali eventi avversi o problemi di qualità riscontrati con l'uso di questo prodotto devono essere segnalati all'Assistenza clienti Teleflex avvalendosi dei recapiti riportati di seguito.

Trasmissione della presente Nota informativa

La presente nota informativa deve essere trasmessa a tutti i soggetti che necessitano di essere informati all'interno della Sua organizzazione o a qualsiasi organizzazione in cui sia stato trasferito il prodotto potenzialmente interessato.

Nella diffusione del presente avviso, La preghiamo di considerare gli utenti finali, i medici, i responsabili del rischio, la catena di fornitura/i centri di distribuzione, i reparti di assistenza, ecc. Mantenga alta l'attenzione su questo avviso finché non verranno completate tutte le azioni richieste nella Sua organizzazione.

Informazioni di contatto

Come sempre, è disponibile il supporto telefonico in tempo reale per i cateteri IAB e IABP Arrow utilizzando i recapiti dell'Assistenza per la cura del paziente riportati di seguito. Per ulteriori informazioni o assistenza su questo problema La preghiamo di contattare l'Assistenza clienti Teleflex tramite e-mail, telefono o fax.

Assistenza per la cura del paziente 24 ore su 24, 7 ore su 7:

Telefono: (978) 250-5177 Internazionale

Assistenza clienti:

Contatto: Giovanni Cordone **Telefono:** 03625890252

E-mail: giovanni.cordone@teleflex.com;

Teleflex si impegna a fornire prodotti di elevata qualità, sicuri ed efficaci. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che la presente azione potrebbe causare alle Sue attività. Per qualsiasi altra domanda, si rivolga al rappresentante commerciale Teleflex di zona o all'Assistenza clienti Teleflex.

Il sottoscritto conferma che il presente avviso è stato notificato all'Autorità di regolamentazione competente.

Da e per conto di Teleflex,

Padraig Hegarty

Padraig Hegarty VP, Global QA (Manufacturing)

Appendice 1

N. cliente

AZIONE CORRETTIVA DI SICUREZZA SUL CAMPO

MODULO DI CONFERMA

AVVISO DI AZIONE SUL CAMPO DEL PRODOTTO DA PARTE DI TELEFLEX – RICHIESTA

ATTENZIONE IMMEDIATA

Rif. EIF-000561

INVIARE IMMEDIATAMENTE IL MODULO COMPILATO A:

E-mail: giovanni.cordone@teleflex.com;

<input type="checkbox"/> Confermiamo la ricezione della presente nota informativa e il completamento delle azioni richieste in essa contenute. Confermiamo inoltre che il nostro inventario NON include i prodotti interessati da questa nota informativa.	<input type="checkbox"/> Confermiamo la ricezione della presente nota informativa e il completamento delle azioni richieste in essa contenute. Confermiamo inoltre che il nostro inventario INCLUDE i prodotti interessati da questa nota informativa.
---	---

Compilare questo Modulo di conferma e restituire immediatamente il modulo compilato utilizzando le informazioni di contatto indicate in precedenza.

NOME ISTITUTO (PER ES., NOME DELL'OSPEDALE, ORGANIZZAZIONE SANITARIA)		
INDIRIZZO DELL'ISTITUTO	TELEFONO/FAX	
MODULO COMPILATO DA	Timbro	
NOME E COGNOME IN STAMPATELLO: _____ FIRMA: _____		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">DATA</td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>		DATA
DATA		

Appendice 2: EIF-000561 – Informazioni su Codice prodotto, Numero di lotto, Identificativo univoco del dispositivo (UDI)

Codice prodotto	Numero di lotto	Identificativo univoco del dispositivo (UDI)
IAB-05830-LWS	18F23A0038	(01)10801902161892(17)241231(10)18F23A0038
IAB-05830-LWS	18F23B0023	(01)10801902161892(17)250131(10)18F23B0023
IAB-05830-LWS	18F23C0026	(01)10801902172843(17)250228(10)18F23C0026
IAB-05830-LWS	18F23D0024	(01)10801902161892(17)250430(10)18F23D0024
IAB-05830-LWS	18F23F0049	(01)10801902172843(17)250531(10)18F23F0049
IAB-05830-LWS	18F23H0060	(01)10801902161892(17)250731(10)18F23H0060
IAB-05830-LWS	18F23J0001	(01)10801902172843(17)250831(10)18F23J0001
IAB-05830-LWS	18F23J0075	(01)10801902161892(17)250930(10)18F23J0075
IAB-05830-LWS	18F23K0013	(01)10801902161892(17)250930(10)18F23K0013
IAB-05830-LWS	18F23L0019	(01)10801902161892(17)251031(10)18F23L0019
IAB-05830-LWS	18F23L0041	(01)10801902161892(17)251031(10)18F23L0041
IAB-05830-LWS	18F23L0054	(01)10801902172843(17)251031(10)18F23L0054
IAB-05830-LWS	18F23M0056	(01)10801902172843(17)251130(10)18F23M0056
IAB-05830-LWS	18F24A0015	(01)10801902172843(17)251231(10)18F24A0015
IAB-05830-LWS	18F24A0040	(01)10801902172843(17)260131(10)18F24A0040
IAB-05830-LWS	18F24B0008	(01)10801902161892(17)260131(10)18F24B0008
IAB-05830-LWS	18F24B0013	(01)10801902172843(17)260131(10)18F24B0013
IAB-05830-LWS	18F24C0058	(01)10801902161892(17)260228(10)18F24C0058
IAB-05830-LWS	18F24C0061	(01)10801902172843(17)260228(10)18F24C0061
IAB-05830-LWS	18F24C0088	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0088
IAB-05830-LWS	18F24C0089	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0089
IAB-05830-LWS	18F24C0101	(01)10801902161892(17)260228(10)18F24C0101
IAB-05830-LWS	18F24C0109	(01)10801902172843(17)260228(10)18F24C0109
IAB-05830-LWS	18F24C0110	(01)10801902172843(17)260228(10)18F24C0110
IAB-05830-LWS	18F24C0172	(01)10801902172843(17)260331(10)18F24C0172
IAB-05830-LWS	18F24C0173	(01)10801902172843(17)260331(10)18F24C0173
IAB-05830-LWS	18F24C0174	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0174
IAB-05830-LWS	18F24C0175	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0175
IAB-05830-LWS	18F24C0176	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0176
IAB-05830-LWS	18F24C0185	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0185
IAB-05830-LWS	18F24D0002	(01)10801902161892(17)260331(10)18F24D0002
IAB-05830-U	18F22F0023	(01)10801902172850(17)240531(10)18F22F0023
IAB-05830-U	18F22G0005	(01)10801902172850(17)240630(10)18F22G0005
IAB-05830-U	18F22G0010	(01)10801902172850(17)240630(10)18F22G0010
IAB-05830-U	18F22H0033	(01)10801902172850(17)240731(10)18F22H0033
IAB-05830-U	18F23E0032	(01)10801902182019(17)250430(10)18F23E0032
IAB-05830-U	18F23J0002	(01)10801902182019(17)250831(10)18F23J0002
IAB-05830-U	18F23J0031	(01)10801902172850(17)250831(10)18F23J0031
IAB-05830-U	18F23J0082	(01)10801902182019(17)250831(10)18F23J0082
IAB-05830-U	18F23K0025	(01)10801902182019(17)250930(10)18F23K0025
IAB-05830-U	18F23K0036	(01)10801902172850(17)250930(10)18F23K0036
IAB-05830-U	18F23K0042	(01)10801902172850(17)250930(10)18F23K0042
IAB-05830-U	18F23M0001	(01)10801902172850(17)251130(10)18F23M0001
IAB-05830-U	18F24C0131	(01)10801902182019(17)260331(10)18F24C0131
IAB-05840-LWS	18F22E0008	(01)10801902172867(17)240430(10)18F22E0008
IAB-05840-LWS	18F22E0029	(01)10801902172867(17)240430(10)18F22E0029
IAB-05840-LWS	18F22F0006	(01)10801902172867(17)240531(10)18F22F0006

Appendice 2: EIF-000561 – Informazioni su Codice prodotto, Numero di lotto, Identificativo univoco del dispositivo (UDI)

Codice prodotto	Numero di lotto	Identificativo univoco del dispositivo (UDI)
IAB-05840-LWS	18F22F0018	(01)10801902172867(17)240531(10)18F22F0018
IAB-05840-LWS	18F22F0039	(01)10801902172867(17)240531(10)18F22F0039
IAB-05840-LWS	18F22F0072	(01)10801902167733(17)240531(10)18F22F0072
IAB-05840-LWS	18F22G0002	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0002
IAB-05840-LWS	18F22G0003	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0003
IAB-05840-LWS	18F22G0019	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0019
IAB-05840-LWS	18F22G0021	(01)10801902167733(17)240630(10)18F22G0021
IAB-05840-LWS	18F22G0031	(01)10801902167733(17)240630(10)18F22G0031
IAB-05840-LWS	18F22G0046	(01)10801902167733(17)240630(10)18F22G0046
IAB-05840-LWS	18F22G0059	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0059
IAB-05840-LWS	18F22H0009	(01)10801902167733(17)240731(10)18F22H0009
IAB-05840-LWS	18F22H0023	(01)10801902167733(17)240731(10)18F22H0023
IAB-05840-LWS	18F22H0035	(01)10801902172867(17)240731(10)18F22H0035
IAB-05840-LWS	18F22H0058	(01)10801902167733(17)240731(10)18F22H0058
IAB-05840-LWS	18F22J0025	(01)10801902172867(17)240831(10)18F22J0025
IAB-05840-LWS	18F22K0015	(01)10801902167733(17)240930(10)18F22K0015
IAB-05840-LWS	18F22K0016	(01)10801902172867(17)240930(10)18F22K0016
IAB-05840-LWS	18F22M0017	(01)10801902167733(17)241130(10)18F22M0017
IAB-05840-LWS	18F22M0018	(01)10801902167733(17)241130(10)18F22M0018
IAB-05840-LWS	18F23A0004	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0004
IAB-05840-LWS	18F23A0005	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0005
IAB-05840-LWS	18F23A0018	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0018
IAB-05840-LWS	18F23A0026	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0026
IAB-05840-LWS	18F23B0008	(01)10801902167733(17)250131(10)18F23B0008
IAB-05840-LWS	18F23B0016	(01)10801902167733(17)250131(10)18F23B0016
IAB-05840-LWS	18F23E0020	(01)10801902172867(17)250430(10)18F23E0020
IAB-05840-LWS	18F23E0054	(01)10801902167733(17)250531(10)18F23E0054
IAB-05840-LWS	18F23F0002	(01)10801902172867(17)250531(10)18F23F0002
IAB-05840-LWS	18F23F0026	(01)10801902172867(17)250531(10)18F23F0026
IAB-05840-LWS	18F23G0008	(01)10801902172867(17)250630(10)18F23G0008
IAB-05840-LWS	18F23G0017	(01)10801902167733(17)250630(10)18F23G0017
IAB-05840-LWS	18F23G0057	(01)10801902172867(17)250731(10)18F23G0057
IAB-05840-LWS	18F23H0013	(01)10801902172867(17)250731(10)18F23H0013
IAB-05840-LWS	18F23H0029	(01)10801902167733(17)250731(10)18F23H0029
IAB-05840-LWS	18F23H0055	(01)10801902172867(17)250731(10)18F23H0055
IAB-05840-LWS	18F23H0064	(01)10801902167733(17)250731(10)18F23H0064
IAB-05840-LWS	18F23J0003	(01)10801902172867(17)250831(10)18F23J0003
IAB-05840-LWS	18F23J0037	(01)10801902172867(17)250831(10)18F23J0037
IAB-05840-LWS	18F23J0072	(01)10801902172867(17)250831(10)18F23J0072
IAB-05840-LWS	18F23J0073	(01)10801902172867(17)250930(10)18F23J0073
IAB-05840-LWS	18F23K0054	(01)10801902172867(17)251031(10)18F23K0054
IAB-05840-LWS	18F23L0009	(01)10801902167733(17)251031(10)18F23L0009
IAB-05840-LWS	18F23L0028	(01)10801902167733(17)251031(10)18F23L0028
IAB-05840-LWS	18F23L0055	(01)10801902172867(17)251130(10)18F23L0055
IAB-05840-LWS	18F23M0043	(01)10801902172867(17)251130(10)18F23M0043
IAB-05840-LWS	18F23M0068	(01)10801902167733(17)251231(10)18F23M0068
IAB-05840-LWS	18F24A0025	(01)10801902172867(17)251231(10)18F24A0025

Appendice 2: EIF-000561 – Informazioni su Codice prodotto, Numero di lotto, Identificativo univoco del dispositivo (UDI)

Codice prodotto	Numero di lotto	Identificativo univoco del dispositivo (UDI)
IAB-05840-LWS	18F24A0030	(01)10801902167733(17)251231(10)18F24A0030
IAB-05840-LWS	18F24A0031	(01)10801902172867(17)251231(10)18F24A0031
IAB-05840-LWS	18F24A0039	(01)10801902167733(17)251231(10)18F24A0039
IAB-05840-LWS	18F24B0005	(01)10801902172867(17)260131(10)18F24B0005
IAB-05840-LWS	18F24B0015	(01)10801902167733(17)260131(10)18F24B0015
IAB-05840-LWS	18F24B0031	(01)10801902167733(17)260131(10)18F24B0031
IAB-05840-LWS	18F24B0048	(01)10801902172867(17)260131(10)18F24B0048
IAB-05840-LWS	18F24B0052	(01)10801902172867(17)260131(10)18F24B0052
IAB-05840-LWS	18F24B0078	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24B0078
IAB-05840-LWS	18F24C0008	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0008
IAB-05840-LWS	18F24C0036	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0036
IAB-05840-LWS	18F24C0064	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0064
IAB-05840-LWS	18F24C0065	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0065
IAB-05840-LWS	18F24C0067	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0067
IAB-05840-LWS	18F24C0068	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0068
IAB-05840-LWS	18F24C0069	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0069
IAB-05840-LWS	18F24C0071	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0071
IAB-05840-LWS	18F24C0072	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0072
IAB-05840-LWS	18F24C0075	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0075
IAB-05840-LWS	18F24C0076	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0076
IAB-05840-LWS	18F24C0077	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0077
IAB-05840-LWS	18F24C0078	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0078
IAB-05840-LWS	18F24C0079	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0079
IAB-05840-LWS	18F24C0080	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0080
IAB-05840-LWS	18F24C0081	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0081
IAB-05840-LWS	18F24C0083	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0083
IAB-05840-LWS	18F24C0105	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0105
IAB-05840-LWS	18F24C0186	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0186
IAB-05840-LWS	18F24C0187	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0187
IAB-05840-LWS	18F24C0188	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0188
IAB-05840-LWS	18F24C0193	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0193
IAB-05840-LWS	18F24D0020	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0020
IAB-05840-LWS	18F24D0021	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0021
IAB-05840-LWS	18F24D0022	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0022
IAB-05840-LWS	18F24D0031	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0031
IAB-05840-LWS	18F24D0032	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0032
IAB-05840-LWS	18F24D0037	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0037
IAB-05840-LWS	18F24D0038	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0038
IAB-05840-LWS	18F24D0039	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0039
IAB-05840-LWS	18F24D0042	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0042
IAB-05840-LWS	18F24D0044	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0044
IAB-05840-LWS	18F24D0045	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0045
IAB-05840-LWS	18F24D0049	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0049
IAB-05840-LWS	18F24D0050	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0050
IAB-05840-LWS	18F24D0051	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0051
IAB-05840-LWS	18F24D0054	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0054
IAB-05840-LWS	18F24D0055	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0055

Appendice 2: EIF-000561 – Informazioni su Codice prodotto, Numero di lotto, Identificativo univoco del dispositivo (UDI)

Codice prodotto	Numero di lotto	Identificativo univoco del dispositivo (UDI)
IAB-05840-LWS	18F24D0072	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0072
IAB-05840-LWS	18F24D0087	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0087
IAB-05840-LWS	18F24D0088	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0088
IAB-05840-LWS	18F24D0089	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0089
IAB-05840-LWS	18F24D0090	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0090
IAB-05840-LWS	18F24D0091	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0091
IAB-05840-LWS	18F24D0092	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0092
IAB-05840-U	18F22E0012	(01)10801902172874(17)240430(10)18F22E0012
IAB-05840-U	18F22G0011	(01)10801902172874(17)240630(10)18F22G0011
IAB-05840-U	18F22G0016	(01)10801902172874(17)240630(10)18F22G0016
IAB-05840-U	18F22G0051	(01)10801902161922(17)240630(10)18F22G0051
IAB-05840-U	18F23A0002	(01)10801902161922(17)241231(10)18F23A0002
IAB-05840-U	18F23A0021	(01)10801902161922(17)241231(10)18F23A0021
IAB-05840-U	18F23A0060	(01)10801902161922(17)241231(10)18F23A0060
IAB-05840-U	18F23G0068	(01)10801902161922(17)250731(10)18F23G0068
IAB-05840-U	18F23K0008	(01)10801902172874(17)251130(10)18F23K0008
IAB-05840-U	18F23K0012	(01)10801902161922(17)250930(10)18F23K0012
IAB-05840-U	18F23K0039	(01)10801902172874(17)250930(10)18F23K0039
IAB-05840-U	18F23K0053	(01)10801902161922(17)251031(10)18F23K0053
IAB-05840-U	18F23K0063	(01)10801902161922(17)251031(10)18F23K0063
IAB-05840-U	18F23L0010	(01)10801902172874(17)251031(10)18F23L0010
IAB-05840-U	18F23L0031	(01)10801902172874(17)251031(10)18F23L0031
IAB-05840-U	18F23L0039	(01)10801902172874(17)251031(10)18F23L0039
IAB-05840-U	18F24B0051	(01)10801902161922(17)260131(10)18F24B0051
IAB-05850-LWS	18F22J0037	(01)10801902167726(17)240831(10)18F22J0037(13)220927
IAB-05850-LWS	18F22J0040	(01)10801902167726(17)240831(10)18F22J0040(13)220929
IAB-05850-LWS	18F22K0044	(01)10801902167726(17)240930(10)18F22K0044(13)221021
IAB-05850-LWS	18F22K0045	(01)10801902167726(17)240930(10)18F22K0045(13)221021
IAB-05850-LWS	18F22K0056	(01)10801902167726(17)241031(10)18F22K0056(13)221028
IAB-05850-LWS	18F22L0012	(01)10801902167726(17)241031(10)18F22L0012(13)221104
IAB-05850-LWS	18F23K0006	(01)10801902167726(17)250930(10)18F23K0006(13)231031
IAB-05850-LWS	18F23K0038	(01)10801902172881(17)250930(10)18F23K0038(13)231028
IAB-05850-LWS	18F24B0049	(01)10801902167726(17)260131(10)18F24B0049(13)240227
IAB-05850-LWS	18F24B0075	(01)10801902167726(17)260228(10)18F24B0075(13)240301
IAB-05850-LWS	18F24C0031	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0031(13)240316
IAB-05850-LWS	18F24C0032	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0032(13)240331
IAB-05850-LWS	18F24C0033	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0033(13)240315
IAB-05850-LWS	18F24C0034	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0034(13)240315
IAB-06830-U	18F22E0062	(01)10801902172898(17)240430(10)18F22E0062
IAB-06830-U	18F22F0007	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0007
IAB-06830-U	18F22F0017	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0017
IAB-06830-U	18F22F0020	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0020
IAB-06830-U	18F22F0034	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0034
IAB-06830-U	18F22F0045	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0045
IAB-06830-U	18F22F0057	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0057
IAB-06830-U	18F22G0001	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0001
IAB-06830-U	18F22G0004	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0004

Appendice 2: EIF-000561 – Informazioni su Codice prodotto, Numero di lotto, Identificativo univoco del dispositivo (UDI)

Codice prodotto	Numero di lotto	Identificativo univoco del dispositivo (UDI)
IAB-06830-U	18F22G0007	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0007
IAB-06830-U	18F22G0014	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0014
IAB-06830-U	18F22H0002	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0002
IAB-06830-U	18F22H0008	(01)10801902161939(17)240731(10)18F22H0008
IAB-06830-U	18F22H0024	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0024
IAB-06830-U	18F22H0029	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0029
IAB-06830-U	18F22H0034	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0034
IAB-06830-U	18F22J0009	(01)10801902172898(17)240831(10)18F22J0009
IAB-06830-U	18F22M0019	(01)10801902161939(17)241130(10)18F22M0019
IAB-06830-U	18F23A0027	(01)10801902161939(17)241231(10)18F23A0027
IAB-06830-U	18F23A0039	(01)10801902161939(17)241231(10)18F23A0039
IAB-06830-U	18F23B0006	(01)10801902161939(17)250131(10)18F23B0006
IAB-06830-U	18F23B0020	(01)10801902161939(17)250131(10)18F23B0020
IAB-06830-U	18F23B0032	(01)10801902161939(17)250131(10)18F23B0032
IAB-06830-U	18F23D0029	(01)10801902172898(17)250430(10)18F23D0029
IAB-06830-U	18F23E0033	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23E0033
IAB-06830-U	18F23E0037	(01)10801902172898(17)250430(10)18F23E0037
IAB-06830-U	18F23E0038	(01)10801902172898(17)250430(10)18F23E0038
IAB-06830-U	18F23E0057	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23E0057
IAB-06830-U	18F23F0023	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23F0023
IAB-06830-U	18F23F0045	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23F0045
IAB-06830-U	18F23G0025	(01)10801902172898(17)250630(10)18F23G0025
IAB-06830-U	18F23G0026	(01)10801902172898(17)250630(10)18F23G0026
IAB-06830-U	18F23G0051	(01)10801902172898(17)250630(10)18F23G0051
IAB-06830-U	18F23G0066	(01)10801902161939(17)250630(10)18F23G0066
IAB-06830-U	18F23G0067	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23G0067
IAB-06830-U	18F23H0009	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0009
IAB-06830-U	18F23H0011	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23H0011
IAB-06830-U	18F23H0025	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0025
IAB-06830-U	18F23H0028	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0028
IAB-06830-U	18F23H0059	(01)10801902161939(17)250731(10)18F23H0059
IAB-06830-U	18F23H0069	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0069
IAB-06830-U	18F23H0070	(01)10801902161939(17)250731(10)18F23H0070
IAB-06830-U	18F23H0074	(01)10801902161939(17)250731(10)18F23H0074
IAB-06830-U	18F23H0080	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0080
IAB-06830-U	18F23J0004	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0004
IAB-06830-U	18F23J0011	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0011
IAB-06830-U	18F23J0015	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0015
IAB-06830-U	18F23J0046	(01)10801902161939(17)250831(10)18F23J0046
IAB-06830-U	18F23J0053	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0053
IAB-06830-U	18F23J0054	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0054
IAB-06830-U	18F23J0055	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0055
IAB-06830-U	18F23J0079	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23J0079
IAB-06830-U	18F23K0003	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0003
IAB-06830-U	18F23K0005	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0005
IAB-06830-U	18F23K0009	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0009
IAB-06830-U	18F23K0051	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0051

Appendice 2: EIF-000561 – Informazioni su Codice prodotto, Numero di lotto, Identificativo univoco del dispositivo (UDI)

Codice prodotto	Numero di lotto	Identificativo univoco del dispositivo (UDI)
IAB-06830-U	18F23K0059	(01)10801902161939(17)250930(10)18F23K0059
IAB-06830-U	18F23K0061	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0061
IAB-06830-U	18F23L0040	(01)10801902172898(17)251031(10)18F23L0040
IAB-06830-U	18F23M0002	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0002
IAB-06830-U	18F23M0044	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0044
IAB-06830-U	18F23M0049	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0049
IAB-06830-U	18F23M0053	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0053
IAB-06830-U	18F23M0054	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0054
IAB-06830-U	18F23M0055	(01)10801902172898(17)251231(10)18F23M0055
IAB-06830-U	18F24A0006	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0006
IAB-06830-U	18F24A0012	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0012
IAB-06830-U	18F24A0013	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0013
IAB-06830-U	18F24A0021	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0021
IAB-06830-U	18F24A0036	(01)10801902161939(17)251231(10)18F24A0036
IAB-06830-U	18F24B0014	(01)10801902172898(17)260131(10)18F24B0014
IAB-06830-U	18F24C0004	(01)10801902172898(17)260228(10)18F24C0004
IAB-06830-U	18F24C0005	(01)10801902172898(17)260228(10)18F24C0005
IAB-06830-U	18F24D0004	(01)10801902161939(17)260331(10)18F24D0004
IAB-06830-U	18F24D0033	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0033
IAB-06830-U	18F24D0036	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0036
IAB-06830-U	18F24D0043	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0043
IAB-06830-U	18F24D0048	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0048
IAB-06830-U	18F24D0086	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0086
IAB-06840-U	18F22E0001	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0001
IAB-06840-U	18F22E0009	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0009
IAB-06840-U	18F22E0014	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0014
IAB-06840-U	18F22E0020	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0020
IAB-06840-U	18F22E0023	(01)10801902161946(17)240430(10)18F22E0023
IAB-06840-U	18F22E0036	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0036
IAB-06840-U	18F22E0037	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0037
IAB-06840-U	18F22E0042	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0042
IAB-06840-U	18F22E0046	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0046
IAB-06840-U	18F22E0048	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0048
IAB-06840-U	18F22E0049	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0049
IAB-06840-U	18F22E0061	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0061
IAB-06840-U	18F22E0065	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0065
IAB-06840-U	18F22E0066	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0066
IAB-06840-U	18F22F0002	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0002
IAB-06840-U	18F22F0009	(01)10801902161946(17)240531(10)18F22F0009
IAB-06840-U	18F22F0010	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0010
IAB-06840-U	18F22F0016	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0016
IAB-06840-U	18F22F0019	(01)10801902161946(17)240531(10)18F22F0019
IAB-06840-U	18F22F0021	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0021
IAB-06840-U	18F22F0022	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0022
IAB-06840-U	18F22F0037	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0037
IAB-06840-U	18F22F0043	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0043
IAB-06840-U	18F22F0047	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0047

Appendice 2: EIF-000561 – Informazioni su Codice prodotto, Numero di lotto, Identificativo univoco del dispositivo (UDI)

Codice prodotto	Numero di lotto	Identificativo univoco del dispositivo (UDI)
IAB-06840-U	18F22F0050	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0050
IAB-06840-U	18F22F0051	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0051
IAB-06840-U	18F22F0054	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0054
IAB-06840-U	18F22F0065	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0065
IAB-06840-U	18F22F0066	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0066
IAB-06840-U	18F22F0067	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0067
IAB-06840-U	18F22G0067	(01)10801902172904(17)240630(10)18F22G0067
IAB-06840-U	18F22H0004	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0004
IAB-06840-U	18F22H0010	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0010
IAB-06840-U	18F22H0014	(01)10801902161946(17)240731(10)18F22H0014
IAB-06840-U	18F22H0026	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22H0026
IAB-06840-U	18F22H0028	(01)10801902161946(17)240731(10)18F22H0028
IAB-06840-U	18F22H0030	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0030
IAB-06840-U	18F22H0036	(01)10801902161946(17)240731(10)18F22H0036
IAB-06840-U	18F22H0038	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0038
IAB-06840-U	18F22H0039	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0039
IAB-06840-U	18F22K0004	(01)10801902172904(17)240930(10)18F22K0004
IAB-06840-U	18F22M0015	(01)10801902161946(17)241130(10)18F22M0015
IAB-06840-U	18F23A0019	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0019
IAB-06840-U	18F23A0025	(01)10801902161946(17)250228(10)18F23A0025
IAB-06840-U	18F23A0037	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0037
IAB-06840-U	18F23A0054	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0054
IAB-06840-U	18F23A0055	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0055
IAB-06840-U	18F23A0061	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0061
IAB-06840-U	18F23A0066	(01)10801902161946(17)250131(10)18F23A0066
IAB-06840-U	18F23A0067	(01)10801902161946(17)250131(10)18F23A0067
IAB-06840-U	18F23B0018	(01)10801902161946(17)250228(10)18F23B0018
IAB-06840-U	18F23C0017	(01)10801902172904(17)250228(10)18F23C0017
IAB-06840-U	18F23C0027	(01)10801902172904(17)250228(10)18F23C0027
IAB-06840-U	18F23C0044	(01)10801902172904(17)250228(10)18F23C0044
IAB-06840-U	18F23D0015	(01)10801902172904(17)250331(10)18F23D0015
IAB-06840-U	18F23D0018	(01)10801902161946(17)250331(10)18F23D0018
IAB-06840-U	18F23D0027	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23D0027
IAB-06840-U	18F23D0028	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23D0028
IAB-06840-U	18F23E0013	(01)10801902161946(17)250430(10)18F23E0013
IAB-06840-U	18F23E0014	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0014
IAB-06840-U	18F23E0015	(01)10801902161946(17)250430(10)18F23E0015
IAB-06840-U	18F23E0028	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0028
IAB-06840-U	18F23E0035	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0035
IAB-06840-U	18F23E0036	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0036
IAB-06840-U	18F23E0050	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0050
IAB-06840-U	18F23E0051	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0051
IAB-06840-U	18F23E0052	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0052
IAB-06840-U	18F23E0055	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23E0055
IAB-06840-U	18F23F0003	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0003
IAB-06840-U	18F23F0006	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0006
IAB-06840-U	18F23F0007	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0007

Appendice 2: EIF-000561 – Informazioni su Codice prodotto, Numero di lotto, Identificativo univoco del dispositivo (UDI)

Codice prodotto	Numero di lotto	Identificativo univoco del dispositivo (UDI)
IAB-06840-U	18F23F0014	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0014
IAB-06840-U	18F23F0015	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0015
IAB-06840-U	18F23F0024	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0024
IAB-06840-U	18F23F0025	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0025
IAB-06840-U	18F23F0048	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0048
IAB-06840-U	18F23F0052	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0052
IAB-06840-U	18F23F0054	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0054
IAB-06840-U	18F23F0059	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0059
IAB-06840-U	18F23G0002	(01)10801902161946(17)250630(10)18F23G0002
IAB-06840-U	18F23G0003	(01)10801902161946(17)250630(10)18F23G0003
IAB-06840-U	18F23G0005	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0005
IAB-06840-U	18F23G0007	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0007
IAB-06840-U	18F23G0011	(01)10801902161946(17)250630(10)18F23G0011
IAB-06840-U	18F23G0014	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0014
IAB-06840-U	18F23G0028	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0028
IAB-06840-U	18F23G0050	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0050
IAB-06840-U	18F23G0053	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0053
IAB-06840-U	18F23G0063	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23G0063
IAB-06840-U	18F23G0064	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23G0064
IAB-06840-U	18F23G0065	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23G0065
IAB-06840-U	18F23H0033	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23H0033
IAB-06840-U	18F23H0034	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0034
IAB-06840-U	18F23H0035	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0035
IAB-06840-U	18F23H0038	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0038
IAB-06840-U	18F23H0053	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0053
IAB-06840-U	18F23H0057	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23H0057
IAB-06840-U	18F23H0058	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0058
IAB-06840-U	18F23H0071	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0071
IAB-06840-U	18F23H0075	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23H0075
IAB-06840-U	18F23J0006	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0006
IAB-06840-U	18F23J0008	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0008
IAB-06840-U	18F23J0014	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0014
IAB-06840-U	18F23J0018	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0018
IAB-06840-U	18F23J0019	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23J0019
IAB-06840-U	18F23J0035	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0035
IAB-06840-U	18F23J0041	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23J0041
IAB-06840-U	18F23J0042	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0042
IAB-06840-U	18F23J0050	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23J0050
IAB-06840-U	18F23K0017	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0017
IAB-06840-U	18F23K0018	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0018
IAB-06840-U	18F23K0019	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0019
IAB-06840-U	18F23K0027	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0027
IAB-06840-U	18F23K0028	(01)10801902161946(17)250930(10)18F23K0028
IAB-06840-U	18F23K0040	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0040
IAB-06840-U	18F23K0045	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0045
IAB-06840-U	18F23K0057	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0057
IAB-06840-U	18F23K0060	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23K0060

Appendice 2: EIF-000561 – Informazioni su Codice prodotto, Numero di lotto, Identificativo univoco del dispositivo (UDI)

Codice prodotto	Numero di lotto	Identificativo univoco del dispositivo (UDI)
IAB-06840-U	18F23L0006	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23L0006
IAB-06840-U	18F23L0029	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23L0029
IAB-06840-U	18F23L0030	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23L0030
IAB-06840-U	18F23M0019	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0019
IAB-06840-U	18F23M0020	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0020
IAB-06840-U	18F23M0037	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0037
IAB-06840-U	18F23M0039	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0039
IAB-06840-U	18F23M0040	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0040
IAB-06840-U	18F23M0041	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0041
IAB-06840-U	18F23M0064	(01)10801902172904(17)251231(10)18F23M0064
IAB-06840-U	18F23M0065	(01)10801902172904(17)251231(10)18F23M0065
IAB-06840-U	18F24A0002	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0002
IAB-06840-U	18F24A0003	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0003
IAB-06840-U	18F24A0004	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0004
IAB-06840-U	18F24A0005	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0005
IAB-06840-U	18F24A0014	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0014
IAB-06840-U	18F24A0016	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0016
IAB-06840-U	18F24A0022	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0022
IAB-06840-U	18F24A0023	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0023
IAB-06840-U	18F24A0024	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0024
IAB-06840-U	18F24A0038	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0038
IAB-06840-U	18F24B0006	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0006
IAB-06840-U	18F24B0007	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0007
IAB-06840-U	18F24B0023	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0023
IAB-06840-U	18F24B0024	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0024
IAB-06840-U	18F24B0025	(01)10801902161946(17)260131(10)18F24B0025
IAB-06840-U	18F24B0026	(01)10801902161946(17)260131(10)18F24B0026
IAB-06840-U	18F24B0027	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0027
IAB-06840-U	18F24B0028	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0028
IAB-06840-U	18F24B0045	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0045
IAB-06840-U	18F24B0046	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0046
IAB-06840-U	18F24B0047	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0047
IAB-06840-U	18F24B0067	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24B0067
IAB-06840-U	18F24B0068	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0068
IAB-06840-U	18F24B0069	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0069
IAB-06840-U	18F24B0070	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24B0070
IAB-06840-U	18F24B0071	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24B0071
IAB-06840-U	18F24C0006	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0006
IAB-06840-U	18F24C0007	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0007
IAB-06840-U	18F24C0028	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0028
IAB-06840-U	18F24C0029	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0029
IAB-06840-U	18F24C0030	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0030
IAB-06840-U	18F24C0038	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0038
IAB-06840-U	18F24C0092	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0092
IAB-06840-U	18F24C0120	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0120
IAB-06840-U	18F24C0121	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0121
IAB-06840-U	18F24C0141	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0141

Appendice 2: EIF-000561 – Informazioni su Codice prodotto, Numero di lotto, Identificativo univoco del dispositivo (UDI)

Codice prodotto	Numero di lotto	Identificativo univoco del dispositivo (UDI)
IAB-06840-U	18F24C0151	(01)10801902161946(17)260228(10)18F24C0151
IAB-06840-U	18F24C0171	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0171
IAB-06840-U	18F24C0177	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0177
IAB-06840-U	18F24C0178	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0178
IAB-06840-U	18F24C0179	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0179
IAB-06840-U	18F24C0180	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0180
IAB-06840-U	18F24C0195	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0195
IAB-06840-U	18F24D0014	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24D0014
IAB-06840-U	18F24D0017	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24D0017
IAB-06840-U	18F24D0030	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24D0030
IAB-06840-U	18R23G0002	(01)10801902172904(17)250331(10)18R23G0002
IAB-06850-U	18F22J0020	(01)10801902144192(17)240831(10)18F22J0020(13)220916
IAB-06850-U	18F22J0038	(01)10801902144192(17)240831(10)18F22J0038(13)220928
IAB-06850-U	18F22J0043	(01)10801902144192(17)240831(10)18F22J0043(13)220930
IAB-06850-U	18F22K0001	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0001(13)221003
IAB-06850-U	18F22K0003	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0003(13)221004
IAB-06850-U	18F22K0006	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0006(13)221006
IAB-06850-U	18F22K0011	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0011(13)221007
IAB-06850-U	18F22K0012	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0012(13)221007
IAB-06850-U	18F22K0013	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0013(13)221007
IAB-06850-U	18F23A0075	(01)10801902144192(17)241231(10)18F23A0075(13)230131
IAB-06850-U	18F23B0005	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0005(13)230203
IAB-06850-U	18F23B0010	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0010(13)230206
IAB-06850-U	18F23B0029	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0029(13)230220
IAB-06850-U	18F23B0030	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0030(13)230220
IAB-06850-U	18F23C0007	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0007(13)230307
IAB-06850-U	18F23C0008	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0008(13)230307
IAB-06850-U	18F23C0014	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0014(13)230310
IAB-06850-U	18F23C0015	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0015(13)230310
IAB-06850-U	18F23F0016	(01)10801902144192(17)250531(10)18F23F0016(13)230609
IAB-06850-U	18F23F0017	(01)10801902144192(17)250531(10)18F23F0017(13)230609
IAB-06850-U	18F23H0061	(01)10801902172911(17)250831(10)18F23H0061(13)230911
IAB-06850-U	18F23J0043	(01)10801902144192(17)250831(10)18F23J0043(13)230921
IAB-06850-U	18F23J0044	(01)10801902144192(17)250831(10)18F23J0044(13)230923
IAB-06850-U	18F23J0078	(01)10801902144192(17)250930(10)18F23J0078(13)231031
IAB-06850-U	18F23K0015	(01)10801902144192(17)250930(10)18F23K0015(13)231031
IAB-06850-U	18F23K0024	(01)10801902144192(17)250930(10)18F23K0024(13)231014
IAB-06850-U	18F23L0045	(01)10801902144192(17)251031(10)18F23L0045(13)231130
IAB-06850-U	18F23L0052	(01)10801902144192(17)251130(10)18F23L0052(13)231205
IAB-06850-U	18F23L0058	(01)10801902144192(17)251130(10)18F23L0058(13)231205
IAB-06850-U	18F24B0010	(01)10801902172911(17)260131(10)18F24B0010(13)240207
IAB-06850-U	18F24B0011	(01)10801902144192(17)260131(10)18F24B0011(13)240209
IAB-06850-U	18F24B0012	(01)10801902144192(17)260131(10)18F24B0012(13)240209

-Fine del documento-